


Sillón de Parto Vertical Hidráulico

MODELOS
SPH/SPH AI



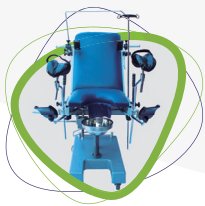

Sillón de Parto Vertical Hidráulico

MODELOS
SPH/SPH AI

Características

El Sillón de Parto Vertical ND Medical brinda comodidad tanto para el profesional como para la parturienta. Además, agregando un suplemento permite transformarlo en una Mesa de Cirugía cuando ciertas circunstancias así lo requieren. Ej, Cesáreas.

La base, construída en acero, se encuentra recubierta con ABS de alto impacto en el Modelo SPH, y en Acero Inoxidable 304 en el Modelo SPH AI, otorgando gran resistencia y estabilidad.

Posee dos ruedas traseras de 125 mm de diámetro que permiten un ágil y suave desplazamiento del Sillón de Parto. Dispone de un freno de accionamiento por pedal. El formato de la base brinda un acceso total y ergonómico al campo operatorio por parte del Profesional.

El tapizado no posee ningún tipo de costura, por lo que no permite la entrada de líquidos. El sector del asiento es desmontable para facilitar la limpieza del mismo.

VARIETADES SPH

AI De acero inoxidable

Accesorios incluidos



Arco de kocher o narcosis



Par de hombros



Par de puños



Par de apoya brazos (opcional)



Par de piernas Goepel



Par de apoya pies (parto vertical)



Juego de 5 morzas




Porta suero




Manivela

MOVIMIENTOS Y POSICIONES

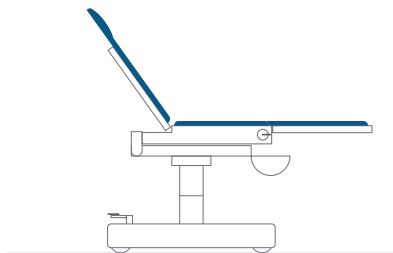

Placa respaldar hacia arriba


55°

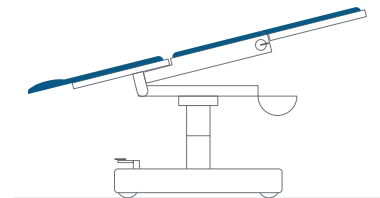

Trendelenburg


14°

PRESTACIONES Y DIMENSIONES

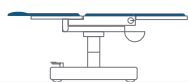

Altura mínima

80 cm

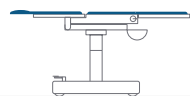

Altura máxima

104 cm



Carga máxima (del paciente)

150 Kg

Ancho de la sillón.....	58 cm
Ancho con guías laterales.....	63 cm
Largo del respaldo.....	77 cm
Largo del asiento.....	45 cm
Largo de la piecera.....	51 cm
Largo Total.....	185 cm
Largo de la base.....	87 cm
Ancho de la base.....	52 cm

NO ARROJAR EN LA VÍA PÚBLICA | ND MEDICAL S.R.L. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Distribuye:



www.ndmedical.com.ar

Carriego 845 (S2002SDA) Rosario - Sta. Fe - Argentina

+54 341 4361082 +54 341 6206906 info@ndmedical.com.ar