





Equipamiento Médico de Alta tecnología

Mesa de Cirugía Eléctrica Fluoroscópica

Nuevo Modelo
MEF RG

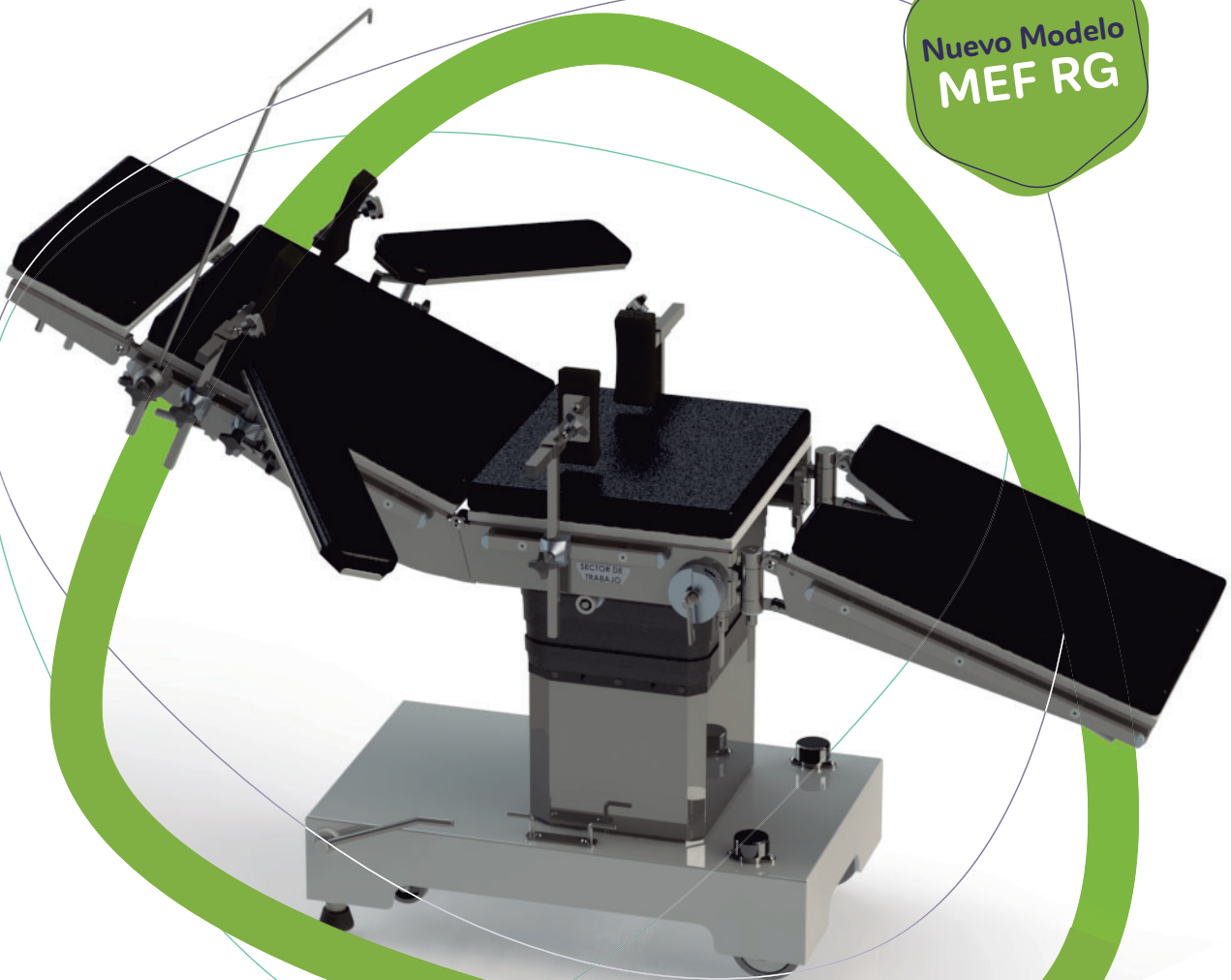

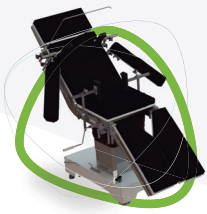

Mesa de Cirugía Eléctrica Fluoroscópica

MODELO
MEF RG

Características

La Mesa de Cirugía MEF RG fue especialmente diseñada para el uso del Equipo Arco en «C», intensificador de imagen y Cirugía Videolaparoscópica debido al desplazamiento longitudinal del asiento de 29 cm. La base, construida en Acero y revestida en Acero Inoxidable 304 otorga gran resistencia y estabilidad.

Posee dos ruedas traseras de 75 mm y de dos ruedas delanteras de 125 mm de diámetro que permiten un ágil y suave desplazamiento de la Mesa de Cirugía. Dispone de un freno de accionamiento manual con patas de goma, lo que permite mayor firmeza y estabilidad. El formato ergonómico de la base brinda un acceso total al campo quirúrgico por parte del Cirujano.

Consta de una columna de elevación con ajuste telescópico de altura de 250 mm y un fuelle de goma desmontable que permite una fácil limpieza de la Mesa. Estas aplicaciones optimizan el posicionamiento del paciente así como su bienestar, mejorando la eficiencia de tareas y seguridad del personal quirúrgico.

Accesorios incluidos



Arco de Kocher o narcosis



Par de hombreras



Correa de fijación



Par de soportes laterales



Juego de 7 morzas



Par de apoya brazos



Par de pierneras de posición universal



Cabezal neurológico




Manivela (MEF RG DL AI)

VARIEDADES MEF RG

AI En Acero Inoxidable 304


DL AI Desplazamiento Longitudinal en Acero Inoxidable 304

MOVIMIENTOS Y POSICIONES

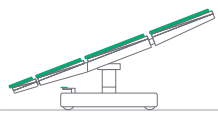


Trendelenburg

25°

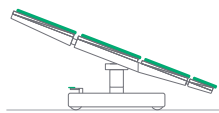


Trendelenburg inverso

15°

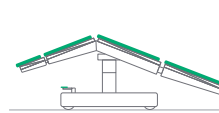

Flex

225°

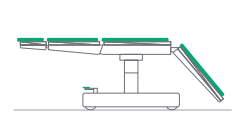


Placa de piernas hacia abajo

60°




Placa de respaldar hacia abajo

40°

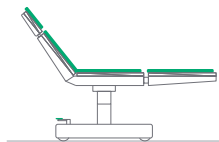


Placa de respaldar hacia arriba

60°

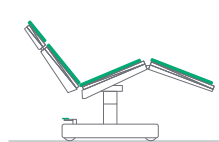

Chair

90° Decúbito supino
30° Trendelenburg
105° Placa de piernas

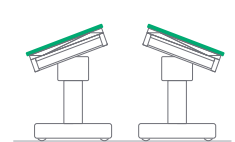

Inclinación derecha/izquierda

17°

PRESTACIONES Y DIMENSIONES



Altura máxima

108 cm



Altura mínima

83 cm



Carga máxima (del paciente)

150 Kg

Ancho de la mesa.....	52 cm
Ancho con guías laterales.....	66 cm
Largo del cabezal.....	25 cm
Largo del respaldo.....	60 cm
Largo del asiento.....	45 cm
Largo de la piñnera.....	73 cm
Largo Total.....	206 cm
Largo de la base.....	87 cm
Ancho de la base.....	52 cm
Ancho de la imagen.....	43.5 cm
Desplazamiento longitudinal (MEF RG DL AI)	29 cm

Distribuye:



www.ndmedical.com.ar

Carriego 845 (S2002SDA) Rosario - Sta. Fe - Argentina

+54 341 4361082 +54 341 6206906 info@ndmedical.com.ar